

## Grid 3



**Software di comunicazione, apprendimento, di controllo ambientale e del computer, accessibile tramite tastiera, mouse, sensori esterni, controllo vocale, puntamento oculare, touch screen.**

### Prezzo


Prezzo (incl. IVA 22%) € 829,60

Prezzo Imponibile (IVA escl.) € 680,00

Ammontare IVA € 149,60

Produttore: [Smartbox Assistive Technology](#)

### Descrizione

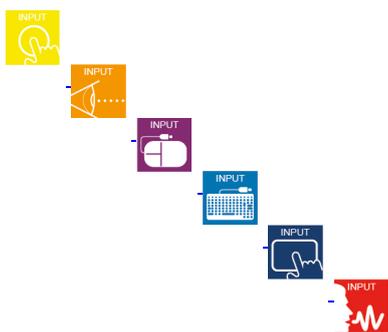

Il nuovo e rinnovato programma Grid 3 può essere usato per l'apprendimento, la didattica, il gioco, il controllo ambientale, oltre che la comunicazione ed il controllo del computer.

Il programma rispetto alla versione precedente The Grid 2, è stato arricchito molto, curato nella grafica, migliorato in alcune funzionalità importanti, pensandolo come un vero ausilio sia per l'utente che per i suoi familiari ed operatori.

Grid 3 ti dà il potere di comunicare, di imparare e di controllare il mondo intorno a te.

Si può fare molto di più con Grid 3. Ci sono più funzioni, più simboli, più voci e più modi per parlare con i tuoi famigliari e agli amici, molto di più rispetto a prima con The Grid2.



**Grid 3 ha 6 aree tematiche principali:**

Uso di **Comunicazione Simbolica** per rappresentare parole e frasi per poter decidere e scegliere ciò che si vuole dire.

**Symbol Talker**

Un semplice percorso guidato in 4 fasi, dalla più semplice struttura comunicativa alla costruzione di un messaggio con i simboli.

**Comunicazione simbolica**

Attività per la comunicazione utilizzando i simboli per rappresentare parole e frasi.



Per la **Comunicazione alfabetica** abbiamo strumenti innovativi per ottenere il vostro messaggio più velocemente che mai.

**Comunicazione alfabetica**

Attività per la comunicazione utilizzando una tastiera con la predizione e frasi predefinite.



**Apprendimento interattivo** è un modo completamente nuovo per le persone di imparare ed esplorare attraverso attività di animazione.

**Apprendimento interattivo**


Attività dinamiche e coinvolgenti per la formazione iniziale.



Le 4 modalità previste contengono a loro volta varie opzioni


**causa effetto**

Attività per comprendere i concetti di causa ed effetto.

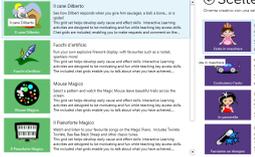

**Sfide**

Attività per comprendere i concetti di giochi e sfide.

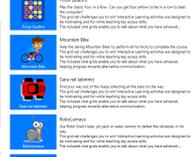

**Scenari**

Attività per comprendere i concetti di situazioni e scenari.



Le **App Accessibili** in Grid 3 consentono di navigare sul web, utilizzare i social media e molto altro ancora.

**App accessibili**

Attività per navigare sul web e utilizzare i social media.



**App accessibili**

Attività per navigare sul web e utilizzare i social media.




**App accessibili**

Attività per navigare sul web e utilizzare i social media.



**App accessibili**


Attività per navigare sul web e utilizzare i social media.

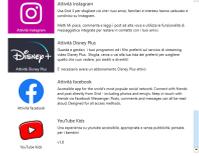

È inoltre possibile avere il **Controllo PC** in tutti gli aspetti e utilizzare qualsiasi programma che si desidera: a casa a scuola o al lavoro.

**Controllo PC**


Attività per accedere alle tue applicazioni di windows preferite.

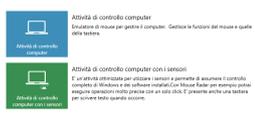

Il modulo di **Controllo Ambientale** permette di prendere il controllo del mondo intorno a voi, di usare e controllare qualsiasi cosa, dal televisore al telefono, sono integrate le funzioni per l'uso del **Control USB** per il controllo ambientale e di **Toybox** per l'uso di giochi adattati.

**Servus controllo ambient...**

Attività per prendere il controllo del mondo intorno, dalla televisione alle porte, appuntamento adattati.

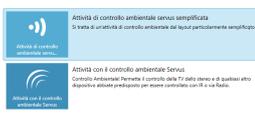

Con Grid 3, le possibilità sono infinite.

### Altre Caratteristiche:

Modalità di comunicazione sia alfabetica che simbolica

- Possibilità di uscita in voce sia sintetizzata che digitalizzata
- Interazione con alcuni programmi esterni e navigazione internet
- Gestione Email, Facebook, Tweeter, Youtube interna a Grid 3 tramite le sue barre di lavoro
- Svariate modalità di input, fra cui sensori esterni, tastiera, mouse di ogni tipo fra cui anche touchscreen e puntamento oculare coi più importanti dispositivi di puntamento oculare presenti sul mercato.

Inoltre:

- Possibilità di avere alla selezione di una cella: feedback visivo, sonoro, lettura dell'elemento selezionato
- La selezione di una cella può avvenire in maniera diretta col click del mouse, o col tocco sul touchscreen, o con la fissazione o ammiccamento tramite puntamento oculare, o con un sensore esterno collegato in modalità mouse, joystick, tastiera, o con un autoclick temporizzato
- Rende possibile utilizzare liste di parole, per la scrittura veloce integra predizione di parola e di parola successiva
- Utilizzato in modalità alfabetica permette all'utente di memorizzare da sé i propri messaggi più frequenti
- Con griglie personalizzate ad hoc, può gestire la domotica, attraverso l'uso di interfacce Ir, RF, ZeegWave, di svariati produttori
- Offre la possibilità di eseguire comandi esterni.
- Grid 3 ha la nuova funzione di [editing da remoto](#) che permette di condividere le proprie tabelle e poterle modificare da remoto.

Sono compatibili con Grid 3 i software di gestione di [Toybox](#) per la gestione di giocattoli adattati a batteria e dell'interfaccia USB di [Control USB](#) per il controllo ambientale.

La schermata di Grid 3 può contenere al massimo 20 colonne per 10 righe per un totale di 200 elementi.

Grid 3 integra alcune librerie di simboli come Widgit Literacy Symbols, SymbolStix, ed è compatibile con molte altre, alcune acquistabili con licenza a pagamento come PCS, Bliss Symbols, Snaps Photo Library. È possibile gestire foto e filmati sia propri che da web.

Grid 3 è un programma per ambiente Windows, esiste un player gratuito [Grid Player](#) per iPad/iPhone scaricabile da AppleStore, esiste anche GRid3 per Ipad acquistabile direttamente da AppleStore.

Per poter trasferire le proprie griglie dal PC all'Ipad è necessario avere [una licenza attivata di Grid 3](#) per Windows, aver creato in Grid 3 un proprio account, oltre ad avere entrambi i sistemi connessi ad internet.

Vi suggeriamo di fare riferimento anche a [Tablet con Grid 3](#)

Questo programma viene installato quasi in tutte le forniture del nostro dispositivo di [puntamento oculare EASYeyes](#) laddove siamo presenti problemi di comunicazione abbinati a problematiche motorie.

Per maggiori dettagli, consulta le seguenti pagine:

- [Grid 3 e le impostazioni per la telecamera CAM30NT di EASYeyes](#) by Alea Technologies
- [Il servizio Aggiornamento Sensory](#)
- [Domande su Aggiornamento Sensory](#)
- [Attivazione licenze Grid 3 e simboli](#)
- Nuova funzione di [Editing da remoto per Grid 3](#)

### SPECIFICHE TECNICHE

- Software per comunicazione interpersonale, controllo ambientale, gestione del computer
- Compatibilità: Windows 7/8/10
- Download possibile dal sito del produttore [www.thinksmartbox.com](http://www.thinksmartbox.com)
- Periodo demo : 60 gg
- Prescrivibilità DM 332/99: [21.42.06.006](#)
- Prescrivibilità [LEA GU 65 18-03-2017 : 22.21.03.009](#)

**Disponibilità:** sempre disponibile