


Interfaccia per sensori - Hitch 2.0 USB

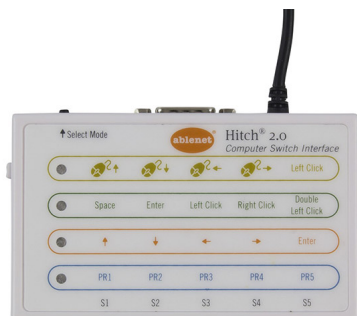

Hitch 2.0 Interfaccia USB per 5 sensori per computer, molto compatta e semplice, anche programmabile.

Prezzo

Prezzo (incl. IVA 22%) € 193,98

Prezzo Imponibile (IVA escl.) € 159,00

Ammontare IVA € 34,98

Produttore: [Ablenet inc](#)

Descrizione

Questa interfaccia per sensori per computer, permette di collegare al computer fino a cinque sensori attraverso la porta USB.

Hitch 2 è un'interfaccia switch USB per computer plug-and-play con ingressi per un massimo di cinque interruttori o un joystick con connettore a D a 9 pin.

Se utilizzato con il software accessibile tramite sensori, gli utenti sono in grado di controllare il proprio computer, imparare attivamente e divertirsi.

Per gli utenti di macOS Sierra, El Capitan, Yosemite o Mavericks, attivare Controllo Sensori (Switch Control) per l'accesso completo al computer con uno o più sensori.

Inoltre, l'Hitch 2 include una modalità di controllo del mouse che consente ad un utente di controllare il cursore del mouse sullo schermo con un joystick o più sensori.

Compatibile con la maggior parte dei s.o. Windows, Mac OSX, Google Chrome, Android

Sono disponibili 3 configurazioni predefinite, è sufficiente premere il pulsantino posto a lato per passare da una configurazione all'altra.

A seconda della posizione del LED (fra le varie righe colorate sul dispositivo) si ha un funzionamento differente.

È utilizzabile anche come sistema per emulare alcune funzioni dei pulsanti del mouse.

E' disponibile una quarta configurazione facilmente programmabile per poter inviare comandi da tastiera

Hitch2.0 viene alimentata direttamente dalla porta USB, non richiede alimentazione esterna.

Utilizza driver standard HID (Human Interface Device) e funziona sotto Windows, Mac e svariati dispositivi dinamici di comunicazione Aumentativa ed Alternativa (Windows-based).

Comandi inviabili

Riga Arancione: Mouse in alto, Mouse in basso, Mouse a sinistra, Mouse a destra, Click Sinistro

Riga Verde: Tasto Spazio, Tasto Invio, Click Sinistro, Click Destro, Doppio Click Sinistro

Riga Rossa: Freccia su, Freccia giù, Freccia sinistra, Freccia destra, Tasto Invio

Riga Blue: Programmazione1, Programmazione2, Programmazione3, Programmazione4, Programmazione5

Accessori Sensori: Interfaccia per sensori - Hitch 2.0 USB

Funziona con qualsiasi programma, anche con programmi educativi.

Porta USB Sensori (non in dotazione)

DOTAZIONE:

Cavetto USB di collegamento al computer.

CARATTERISTICHE:

- Connessione: porta USB
- Compatibilità: Windows, Mac
- Dimensioni: cm
- Ingressi per sensori: 5 da 3,5 mm, mono
- Drivers: HID standard

Prescrivibilità LEA: 24.09.24.003

Disponibilità: prodotto sempre disponibile.