


## LipStick - Mouse a bocca

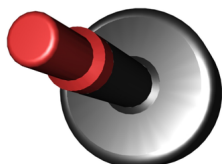

**Mouse a bocca LipStick. Dispositivo per il controllo delle funzioni del mouse tramite i movimenti della bocca e/o labbra.**

### Prezzo

Prezzo (incl. IVA 22%) € 1817,80

Prezzo Imponibile (IVA escl.) € 1490,00

Ammontare IVA € 327,80

Produttore: [Shannon Electronics](#)

### Descrizione

LipStick, è un mouse a bocca.

È un mouse alternativo, una soluzione ottimale per coloro che non sono in grado di gestire un mouse convenzionale.

Tutte le funzioni mouse vengono controllate con la bocca: il cursore sullo schermo segue i movimenti della bocca ed i pulsanti vengono azionati dalle labbra.

### Forza di controllo

Il cursore viene mosso con movimenti minimi del capo e la forza necessaria a produrre il movimento del cursore può essere regolata con parametri che vanno da un minimo molto ridotto a una forza molto grande.

Impostando la sensibilità massima si otterrà il movimento del cursore con meno di 10 grammi di forza.

### Controllo del cursore molto accurato

LipStick permette un controllo cursore molto accurato sia per movimenti molto piccoli che per movimenti molto grandi. I movimenti del cursore sono armoniosi e scorrevoli, liberi da balzi o saltelli.

L'accuratezza è tale da rendere possibilissimo anche il controllo pixel per pixel. Dotato di accelerazione automatica per movimenti grandi e veloci.

### Cliccare con le labbra

I click sinistro e destro del mouse si ottengono alzando il labbro superiore o inferiore anziché soffiare o succhiare come per altri mouse a bocca. Anche il trascinarsi è facile!

### Compatibilità

LipStick è compatibile con i s.o. Windows, Apple, Linux o Android basta una connessione USB.

È compatibile con la maggior parte dei tablet e smartphone (dispositivi Android devono essere compatibili [OTG](#)).

Non ha limiti di funzionalità sui diversi applicativi del computer: può essere quindi utilizzato per la gestione completa del computer, la scrittura, la navigazione in internet, i giochi e con qualsiasi applicativo Windows.

### Requisiti

- Porta USB
- Sistema operativo che supporti le funzioni USB

### Dotazione

LipStick viene fornito col proprio software per ambiente Windows per le impostazioni di alcuni parametri.

Una volta definiti i parametri d'uso, il software non serve più. Basta collegare il mouse LipStick al proprio dispositivo, sia esso un computer o un tablet o uno smartphone attraverso la porta USB ed il mouse viene riconosciuto automaticamente senza la necessità di alcun driver.

### Accessori

LipStick Mouse dev'essere fissato ad un supporto come il [supporto per Lipstick](#) o il [braccio articolato Magic Arm](#) (a scelta, entrambi non in dotazione) per poterlo posizionare adeguatamente rispetto all'utilizzatore.

### Consigli

Per usare LipStick visionate il video seguente:

Video (in inglese)

Per capire come pulire/sanificare LipStick visionate il video seguente:

Video

### INFO

- Connettore: USB
- Dimensioni: 13 cm x 21 cm x 7 cm
- Compatibilità: Windows, Mac, Linux, Android
- Disponibilità: su richiesta