

Grid 3



Software di comunicazione, apprendimento, di controllo ambientale e del computer, accessibile tramite tastiera, mouse, sensori esterni, controllo vocale, puntamento oculare, touch screen.

Prezzo


Prezzo (inc. IVA 22%) € 707,20

Prezzo (IVA escl.) € 680,00

Ammontare IVA € 27,20

Produttore [Smartbox Assistive Technology](#)

Descrizione

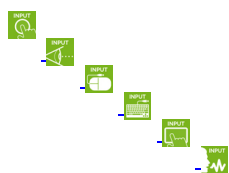

Il nuovo e rinnovato programma Grid 3 può essere usato per l'apprendimento, la didattica, il gioco, il controllo ambientale, oltre che la comunicazione ed il controllo del computer.

Il programma rispetto alla versione precedente The Grid 2, è stato arricchito molto, curato nella grafica, migliorato in alcune funzionalità importanti, pensandolo come un vero ausilio sia per l'utente che per i suoi familiari ed operatori.

Grid3 ti dà il potere di comunicare, di imparare e di controllare il mondo intorno a te.

Si può fare molto di più con Grid3. Ci sono più funzioni, più simboli, più voci e più modi per parlare con i tuoi famigliari e agli amici, molto di più rispetto a prima con The Grid2.

Grid3 ha **6 aree tematiche principali:**

Uso dei simboli per rappresentare parole e frasi per poter decidere e scegliere ciò che si vuole dire.

Per la comunicazione alfabetica abbiamo strumenti innovativi per ottenere il vostro messaggio più velocemente che mai.

Apprendimento interattivo è un modo completamente nuovo per le persone di imparare ed esplorare attraverso attività di animazione.

Le applicazioni accessibili in Grid3 consentono di navigare sul web, utilizzare i social media e molto altro ancora.

Il modulo di Controllo ambiente permette di prendere il controllo del mondo intorno a voi, di usare e controllare qualsiasi cosa, dal televisore al

telefono, sono integrate le funzioni per l'uso del [Control USB](#) per il controllo ambientale e di [Toybox](#) per l'uso di giochi adattati. È inoltre possibile controllare tutti gli aspetti del vostro computer e utilizzare qualsiasi programma che si desidera: a casa a scuola o al lavoro. Con Grid3, le possibilità sono infinite.

Altre Caratteristiche:

Modalità di comunicazione sia alfabetica che simbolica

- Possibilità di uscita in voce sia sintetizzata che digitalizzata
- Interazione con alcuni programmi esterni e navigazione internet
- Gestione Email, Facebook, Tweeter, Youtube interna a Grid3 tramite le sue barre di lavoro
- Svariate modalità di input, fra cui sensori esterni, tastiera, mouse di ogni tipo fra cui anche touchscreen e puntamento oculare coi più importanti dispositivi di puntamento oculare presenti sul mercato.

Inoltre:

- Possibilità di avere alla selezione di una cella: feedback visivo, sonoro, lettura dell'elemento selezionato
- La selezione di una cella può avvenire in maniera diretta col click del mouse, o col tocco sul touchscreen, o con la fissazione o ammiccamento tramite puntamento oculare, o con un sensore esterno collegato in modalità mouse, joystick, tastiera, o con un autoclick temporizzato
- Rende possibile utilizzare liste di parole, per la scrittura veloce integra predizione di parola e di parola successiva
- Utilizzato in modalità alfabetica permette all'utente di memorizzare da sé i propri messaggi più frequenti
- Con griglie personalizzate ad hoc, può gestire la domotica, attraverso l'uso di interfacce Ir, RF, ZeegWave, di svariati produttori
- Offre la possibilità di eseguire comandi esterni.
- Grid3 ha la nuova funzione di [editing da remoto](#) che permette di condividere le proprie tabelle e poterle modificare da remoto.

Sono compatibili con Grid3 i software di gestione di [Toybox](#) per la gestione di giocattoli adattati a batteria e dell'interfaccia USB di [Control USB](#) per il controllo ambientale.

La schermata di Grid3 può contenere al massimo 20 colonne per 10 righe per un totale di 200 elementi.

Grid3 integra alcune librerie di simboli come Widgit Literacy Symbols, SymbolStix, ed è compatibile con molte altre, alcune acquistabili con licenza a pagamento come PCS, Bliss Symbols, Snaps Photo Library. È possibile gestire foto e filmati sia propri che da web.

Grid3 è un programma per ambiente Windows, ma esiste un player gratuito [Grid Player](#) per iPad/iPhone scaricabile da AppleStore. Per poter trasferire le proprie griglie dal PC all'ipad è necessario avere [una licenza attivata di Grid3](#) per Windows, aver creato in Grid3 un proprio account, oltre ad avere entrambi i sistemi connessi ad internet.

Vi suggeriamo di fare riferimento anche a [Tablet con Grid3](#)

Per maggiori dettagli, consulta le seguenti pagine:

- [Grid 3 e le impostazioni per la telecamera CAM30NT di EASYeyes](#) by Alea Technologies
- [Il servizio Aggiornamento Sensory](#)
- [Domande su Aggiornamento Sensory](#)
- [Attivazione licenze Grid3 e simboli](#)
- Nuova funzione di [Editing da remoto per Grid3](#)
- [Richiesta di preventivi](#)

SPECIFICHE TECNICHE

- Software per comunicazione interpersonale, controllo ambientale, gestione del computer
- Compatibilità: Windows 7/8/10
- Download possibile dal sito del produttore www.thinksmartbox.com
- Periodo demo : 60 gg
- Prescrivibilità DM 332/99: [21.42.06.006](#)
- Prescrivibilità LEA GU 65 18-03-2017 : ISO 22.21.12003

Disponibilità: sempre disponibile