


Sensore Vibra Lite + SLAT

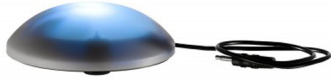

Un sensore tondo e luminoso che combina stimolazione tattile e visiva con design ergonomico.

Prezzo

Prezzo (incl. IVA 22%) € 169,58

Prezzo Imponibile (IVA escl.) € 139,00

Ammontare IVA € 30,58

Produttore: [ALTRI](#)

Descrizione

Il sensore Vibra Lite è stato sviluppato per gli utenti con esigenze particolari. La sua costruzione robusta lo rende resistente, robusto, di lunga durata e facile da usare.

Selezionare tra modalità diretta, bloccata o temporizzata e collegare il vostro dispositivo.

Tempo regolabile da cinque secondi a due minuti.

Funzione lampeggio: il sensore si illumina una volta ogni quattro secondi, si illumina e vibra quando viene premuto (entrambe le caratteristiche possono essere disattivate se necessario).

Si può collegare quasi ad ogni comunicatore, giocattolo o dispositivo con connettore da 3,5mm e poi basta premere la superficie di attivazione semisferica per farlo funzionare. È possibile cambiarne il funzionamento ed impostare la temporizzazione secondo il bisogno ed a seconda dalla apparecchiatura cui è collegato.

Basta impostare il sensore per il funzionamento diretto o bloccato o temporizzato; fino ad una temporizzazione di due minuti. Questa funzionalità è molto utile per la progressione nell'uso dei sensori e la comprensione del causa ed effetto.

Si illumina - La parte semisferica brilla e lo rende ideale per il lavoro multisensoriale. Lampeggia lentamente o per il tempo della pressione.

Vibra - Il sensore Vibra Lite può essere impostato su vibrazione quando si preme la parte semisferica o ad impulso ogni 4 secondi.

Il sensore utilizza due batterie AA e può essere montato su un braccio per l'uso in carrozzina.

INFO

- Connettore: Jack da 3,5 mm mono
- Diametro: 11,2 cm
- Altezza : 3,8 cm

Sensori: Sensore Vibra Lite + SLAT

- Alimentazione: richiede due batterie a stilo AA (in dotazione)

Disponibilità prodotto: Sempre disponibile.

Vedi articolo [Temporizzatore: comparazioni e suggerimenti](#)