

Tubo a bolle Luminea




Il tubo a bolle Luminea, molto più che un tubo a bolle

Prezzo

Produttore: [Qinera](#)

Descrizione

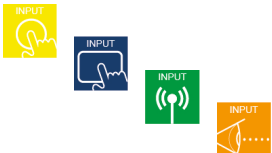

Il tubo a bolle si distingue nell'oscurità e attira l'attenzione di chiunque gli si avvicini con la sua luce e movimento. Questo tubo a bolle aiuta a creare atmosfere innumerevoli usando i suoi colori, vibrazioni, suono, riflessi, oggetti galleggianti e interazione.

Interagisci con la luce come mai prima d'ora.

Il nostro tubo a bolle Luminea può essere utilizzato con controllers di vario tipo: [Pulsantiera a 6 tasti](#), un [Dado gigante](#), da uno a tre sensori che possono essere [Sensore wireless a radio frequenza](#) o [sensori singoli cablati o non](#) anche con un tablet Android tramite l'[app Luminea](#) (se il tubo non è inserito in un allestimento SHX) per controllare i colori del tubo in un modo unico.

Moltiplica le sue possibilità.

Oltre a poter far parte di una piccola stanza sensoriale come nella configurazione dell'[Angolo Luminea](#), il **Tubo a Bolle Luminea** può anche essere parte del [sistema SHX](#) come parte di un **ambiente multisensoriale** più completo, che moltiplica le possibilità interattive all'interno di un sistema integrato che incorpora i restanti dispositivi all'interno della stanza, **tra cui proiezione, suono, vibrazione, ecc.**

Tutte le funzionalità offerte dal sistema SHX, come **controllo vocale, puntamento oculare**, uso di vari controller tra cui il Tappetino SHX, il Dado SHX, Button 6 e altri dispositivi di accesso sono possibili anche con il nostro Tubo a Bolle Luminea.

Scopri di più sulle Stanze Multisensoriali SHX e sull'autentica esperienza immersiva [facendo clic qui](#).

Non riuscirai a smettere di guardarlo!

Il Tubo a Bolle Luminea ha anche una modalità speciale chiamata "Fiotto singolo" che produce una bolla singola e grande che si sposta gradualmente verso la parte superiore del tubo. Questo è l'ideale per gli utenti che richiedono di concentrarsi su attività legate alla costruzione dell'attenzione e al tracciamento visivo.

Tubo a bolle: Tubo a bolle Luminea

Aggiungi il [kit delle palline per il Tubo a Bolle](#) per moltiplicare l'impatto visivo o in alternativa il [kit dei pesciolini](#).

Uno stimolo piacevolmente sorprendente che affascinerà l'utente.

Utile per...

- ? Tracciamento visivo
- ? Attenzione / attenzione
- ? Causa ed effetto
- ? Preferenze / scelte
- ? Memoria
- ? A turno
- ? Integrazione visiva del motore
- ? Comunicazione e abilità sociali
- ? Abilità di conteggio

E molti altri benefici terapeutici, grazie alle sue numerose possibilità interattive.

Adatto a

Paralisi cerebrale
Disturbo dello spettro autistico
Lesioni cerebrali: ictus, trauma cranico ...
Difficoltà di apprendimento
Gli anziani
Deficit visivo
Bambini piccoli, intervento precoce

SICUREZZA: Per fruire al meglio delle stimolazioni sensoriali fornite dal tubo a bolle, e per utilizzarlo in sicurezza, è necessario utilizzare questo tubo insieme ad una seduta ([seduta quadrata](#) o [angolare](#) per tubo a bolle) che ne garantisca la stabilità e che consenta all'utilizzatore sia di avvicinarsi sia di poter appoggiare le mani al tubo per godere delle vibrazioni prodotte dal movimento delle bolle d'aria.

Caratteristiche

Dimensioni: altezza totale 180, diametro esterno tubo 20 cm, spessore tubo 5 mm, base diam 36cm *ca 16 cm altezza

Alta luminosità

Metacrilato di alta qualità per evitare graffi e mantenere la trasparenza

Alimentazione: 220V

Ingresso A per sensore per attivazione/disattivazione bolle

Ingresso B per sensore per selezione sequenziale del colore, bolle sempre attive

Ingresso C per sensore per accensione/spegnimento della modalità AUTOMATICA sequenziale, sempre con bolle attive (ciclo di 7 colori)

Modalità AUTO: cambio colore ciclico senza controller

Modo Compatibile Luminea

Modo Compatibile SHX

Ingresso/uscita DMX

Collegamento: con cavo 3 poli XLR in dotazione per utilizzo in modalità SHX

Ricevitore a radiofrequenza integrato compatibile con i controller Qinera.

Doppio WiFi (sia per la configurazione che per la connessione alla vostra rete per l'utilizzo in modalità esclusiva Luminea, non SHX)

Tre tipologie di comando per le bolle: bolle continue, fiotto singolo e fiotto ripetuto

DOTAZIONE

Viene fornito il solo Tubo Luminea, senza alcun accessorio se non l'alimentatore ed un cavo XLR per l'utilizzo nell'ambito di una Stanza Multisensoriale SHX.

FUNZIONAMENTO in modalità Luminea indipendente no-SHX (Snoezelen)

Quando il tubo -dopo averlo riempito d'acqua demineralizzata, viene alimentato elettricamente si illumina e iniziano a salire le bolle d'aria. Il colore d'illuminazione cambia in maniera temporizzata.

Se ci si è dotati di un Sensore Button1 il tubo funzionerà secondo le impostazioni del Button1.

Se ci si è dotati di un sensore singolo con connettore da 3,5mm lo si può collegare ad uno dei tre ingressi disponibili:

Ingresso A: permette di accendere e spegnere le bolle d'aria, indipendentemente dall'illuminazione

Ingresso B: permette di cambiare il colore di illuminazione del tubo in modalità sequenziale con un ciclo di 6 colori e poi lo spegnimento sia dell'illuminazione che delle bolle.

Ingresso C: permette di avere una modalità di funzionamento AUTOMATICO con il cambio del colore e la durata della transizione da un colore all'altro in maniera automatica ed autonoma, anche con lo spegnimento delle bolle ed il riavvio delle attività del tubo.

In alternativa a queste modalità il tubo a bolle Luminea può essere utilizzato grazie alla app gratuita Luminea scaricabile da Play store per dispositivi Android.

Tubo a bolle: Tubo a bolle Luminea

Disponibilità: su richiesta